

# Letto da parto AVE 2



reddot award 2017  
winner

Benvenuto al mondo, bambino!

# L'inizio del viaggio

Il letto da parto AVE 2 è adatto a tutte le fasi del parto: prodromica, dilatante, espulsiva, secondamento ed ed post-partum. Utilizzando un letto AVE 2, una donna può partorire sostenuta dai suoi famigliari, in un ambiente molto confortevole e premuroso, come se fosse nella sua propria stanza da letto.



Design attrattivo e funzionale



Facile sanificazione

Il posizionamento ad un'altezza minima di 600 mm è idoneo per un accesso sicuro al letto e per vari esercizi che agevolano il travaglio.



Durante il travaglio, la partoriente potrà cambiare facilmente la sua posizione.



Il massimo sollevamento, fino a 1050 mm permette una posizione perfetta per il trattamento perineale.



Un sonno rilassante è importante durante la fase di recupero. Ave 2 possiede tutte le caratteristiche per assecondare la partoriente anche nella fase post-partum.



# I punti di forza di AVE 2



- La libertà di cambiare la posizione durante il parto
- Incoraggia ed agevola il parto naturale
- Massima sicurezza per il bambino e la madre durante il travaglio



Paziente

- Funzioni intuitive e facili da adoperare
- Massima sanificazione
- Carico di lavoro ridotto al minimo



Personale

- Design eccezionale
- Alto livello di erogazione delle cure
- Da sale distinte per parto e travaglio a centro nascita



Gestione

# Dove inizia il miracolo della

## SPAZIO ADESSO

Un semplice meccanismo a perno fa slittare la sezione dei piedi, preparando la postazione per la fase di espulsione. La sezione piedi rimane inclusa nel letto, al riparo di qualsiasi rischio di ulteriore contaminazione o di carico di lavoro supplementare per lo staff.



La pediera è la parte del letto dove, grazie alle soluzioni tecniche innovative, si ha il massimo dell'ergonomia e la possibilità di eseguire l'intera procedura del parto.



Facendola scorrere verso il basso, da sostegno ai piedi.



Facendola scorrere verso l'alto, è possibile ottenere rapidamente un letto in posizione orizzontale. La pediera ha la stessa capacità di carico del letto intero e permette l'utilizzo dell'area come confortevole culla provvisoria per il bambino.

# Sistemazione facile

La progettazione del supporto delle gambe consente al team di cura di rispondere molto rapidamente ed efficace a diverse situazioni che possono verificarsi durante il parto.



*Aggiustamento rapido del supporto gambe nella posizione desiderata.*



*Regolazione dell'altezza dei reggi gambe in funzione della statura paziente*

*La sezione gambe permette l'apertura orizzontale per agevolare il facile accesso alla futura mamma*

## FORMA AD U

La particolare forma ovale del sedile crea lo spazio necessario all'accesso nella zona perineale e si adatta molto bene alla vasca da bagno minimizzando i spazi vuoti.



*L'inclinazione pelvica motorizzata indipendente offre una migliore elevazione del coccige.*

## MANIGLIE

Aumentano il comfort di una donna nella seconda fase del parto.

## 4LIFT

La soluzione telescopica innovativa permette una bassa altezza ideale per accedere al letto in modo sicuro ed un'altezza supplementare per il trattamento.



# Sponde

Le sponde laterali, con pannello di controllo integrato sono facilmente reclinabili, in modo silenzioso. Si possono posizionare sotto il letto durante i trasferimenti da un letto all'altro e servono anche ad agevolare l'accesso al letto.



## CONTROLLO SEMPLICE

Pannello di controllo integrato, con simboli facili da intuire sia per la partoriente sia per il personale infermieristico.

Dotato di opzione blocco da parte dello staff.

### Controlli abilitati:

1. Regolazione dell'altezza e dell'inclinazione
2. Posizione Trendelenburg
3. Controllo del blocco
4. Luce sotto il letto (facoltativo)
5. Chiamata infermiera (opzionale)



## IGIENE E SICUREZZA

L'elevato standard dell' incontaminazione, la costruzione compatta delle varie sezioni così come la copertura in plastica della base riducono il tempo necessario per la pulizia del letto.

1. Pelle batteriostatica
2. Rivestimento senza cuciture
3. Spazio compatto e separabile
4. Verniciatura elettrostatica con rivestimento in polvere epossidica contro la corrosione

La struttura solida del letto la parto AVE 2 non contiene punti aguzzi o bordi taglienti, assicurando la massima sicurezza di tutti quelli che si trovano nella prossimità del letto.



# Sicurezza





*Trendelenburg*



*CPR*

1. Trendelenburg e CPR
2. Batteria di backup
3. ABS facilmente disinfettabile
4. Controllo del blocco
5. Sistema di sollevamento a colonna
6. Facile accesso al freno centrale
7. Spostamento facile con la rotella direzionale e le maniglie di spinta
8. Testiera rimovibile per anestesisti (opzionale)
9. Chiamata infermiera (opzionale)
10. Supporti ribaltabili

# La libertà di cambiare la



*Litotomica*



*Sul fianco*



*Semi sdraiata con piedi appoggiati sul supporto gambe*



*Posizione verticale*



*Semi sdraiata appoggiata sul supporto piedi*



*Appoggiata sul trapezio*

# posizione



*Posizione All fours*



*Semi seduta utilizzando le reggi gambe*



*Semi seduta sulla sezione piedi*



*Posizione epidurale*



*Trattamento perineale*



*Semi seduta assistita*

# Sì al parto naturale

La nascita naturale è indicata se la partoriente desidera mantenere il controllo del suo corpo, partecipando attivamente durante tutto il travaglio, con minimi interventi medici. Con una buona preparazione e un adeguato sostegno, le donne spesso si sentono fortificate e profondamente soddisfatte dal parto naturale. AVE 2 è stato costruito per assecondare in tutto questa decisione.



## LA SCELTA DEI COLORI

La gamma dei colori disponibile soddisfa tutti i stili di arredamento di una sala da parto.



*Blue*



*Giallo*



*Arancio*



*Verde*



*Viola*

# Accessori



*Testiera rimovibile*



*Secchio in acciaio inox con ruote*



*Asta porta flebo telescopica*



*Telecomando*



*Luce sotto il letto*




*Bacinella 4,5l in acciaio inox scorrevole*



*Materasso aggiuntivo*




*Supporto anteriore*

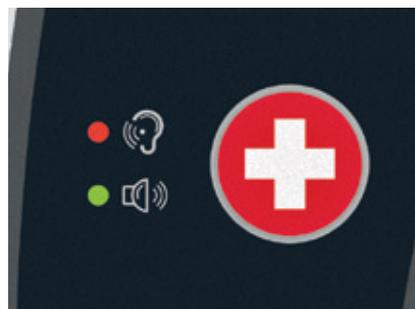

*Chiamata infermiera*



*Barra porta drenaggi*

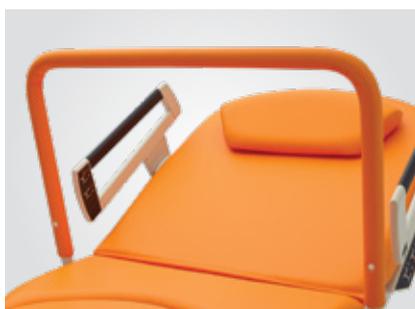

*Barra di appoggio*



*Cucino*

# Parametri



## PARAMETRI TECNICI

Lunghezza totale della parte letto	2122 mm
Lunghezza minima nell'impostazione predefinita	1570 mm
Larghezza totale	980 mm
Dimensione rotelle	150 mm
Altezza minima	600 mm
Altezza massima	1050 mm
Inclinazione Sezione schienale	-10°/+70°
Inclinazione Sezione sedile	0°/+18,5°
Trendelenburg	0°/-10°
Poggia gambe verticale	0°/+135°
Poggia gambe orizzontalmente	0°/+60°
Angolo di regolazione della poggia piedi	0°/-22°
Massimo carico paziente	240 kg
Peso totale del prodotto	245 kg

## PARAMETRI ELETTRICI

Batteria backup	24V/1.2 Ah
Tensione di alimentazione	230 V
Tensione	24 V
Copertura del letto di parto	IPX4
Apparecchio di classe	class I.
Classifica di componenti d'attacco B	

## CONFIGURAZIONE STANDARD

- Poggia gambe standard con cinghie (coppia)
- Batteria backup
- Sezione piedi scorrevole imbottita
- Rivestimento materasso senza cuciture in pelle batteriostatica
- Trendelenburg elettrico e CPR manuale
- Supporto per asta da flebo su entrambi i lati del letto
- Sponde con pannello controllo integrato
- Pannello fisso con comandi
- Maniglie (coppia)
- Ruote 150 mm, 1x direzionale
- Freno centrale
- Accoppiamento equipotenziale
- Cavo di rete a scelta
- Varie opzioni di colore
- Imballaggio

# AVE 2

Paziente

- La libertà di cambiare la posizione durante il parto
- Incoraggia ed agevola il parto naturale
- Massima sicurezza per il bambino e la madre durante il travaglio



- Funzioni intuitive e facili da adoperare
- Massima sanificazione
- Carico di lavoro ridotto al minimo



Personale

Gestione

- Design eccezionale
- Alto livello di erogazione delle cure
- Da sale diverse per parto e travaglio a centro nascita



 wissner-  
bosserhoff

 LINET®

Members of LINET Group

**Linet Italia. s r.l. unipersonale**

via G.Galilei n°48 | 25020 Poncarale (BS)

tel.: +39 030 3229519 | fax: +39 0302540116 | e.mail: [marketing@linetitalia.com](mailto:marketing@linetitalia.com) | [www.linet-italia.com](http://www.linet-italia.com)

