

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff


Eleganza e funzionalità nell'assistenza



hospitel

Letti di degenza speciali



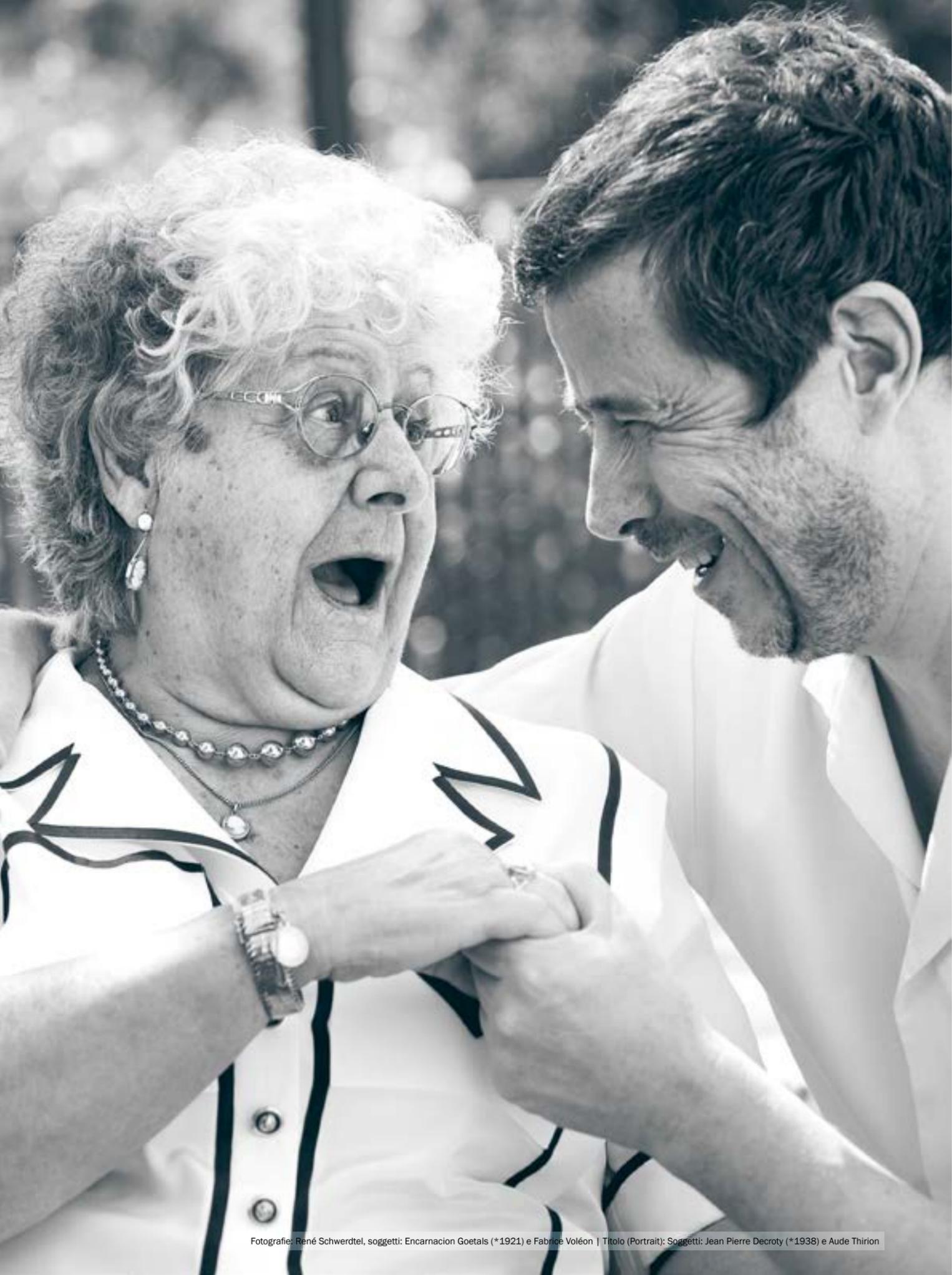

Il concetto di hospitel

Più di un semplice letto di degenza/ospedaliero: hospital + hotel = hospitel

Il concetto di hospitel è la sintesi di comodità, comfort e polifunzionalità.

Trova applicazione non tanto nell'assistenza ai pazienti in fase acuta ricoverati in ospedale, quanto piuttosto principalmente nell'assistenza ai pazienti in fase post-acuta nei reparti di:

- psichiatria
- lungodegenza
- geriatria
- ortopedia
- riabilitazione
- chirurgia plastica

Una serie di optional e accessori protegge in egual misura sia il personale sia i pazienti, soprattutto nelle strutture residenziali psichiatriche e in caso di pazienti agitati.



I vantaggi in sintesi:

- design che contribuisce a rendere l'ambiente caldo e accogliente, idoneo a favorire una rapida guarigione ("healing environment")
- sponde laterali che agevolano la mobilizzazione: senza vuoti, senza aste e senza binari
- facile da pulire grazie alle superfici di materiale sintetico
- prevenzione delle 'infezioni crociate' grazie alla soluzione con testiera ribaltabile + protezioni laterali senza imbottitura
- funzioni automatiche: Cardiac Chair e sollevamento elettrico del gambale
- CPR attivabile con una mano sola, da ambedue i lati del letto
- possibilità di allungare il letto con una mano sola
- telaio BiNetic per la prevenzione delle piaghe da decubito e posizione di seduta comfort ergonomica

Il concetto di abitabilità di hospitel



La gamma di materiali e colori s'ispira alla tendenza dominante che punta sulla naturalità dell'abitazione. Si ottiene in questo modo un ambiente caldo e confortevole, in cui il degente si sente protetto e sicuro. Un "healing environment" che favorisce una rapida guarigione.



Letto basso per lungodegenti sentida 6 mod. A10



Comodino vivo E2T



Rivestimento ciliegio

hospital | Funzionalità e comodità

01

Tecnologia esclusiva SafeFree® per le sponde laterali

Spesso imitati, mai uguali: il nostro contributo alla riduzione dei sistemi di ritenuta come proposto in Germania dai progetti Werdenfeller Weg* e Redufix**

- sponde laterali divise in sezioni, ciascuna regolabile in 4 posizioni
- senza colonna centrale né pericolosi vuoti intermedi

02

3 livelli di arresto***

per la regolazione dell'altezza

- riduzione del rischio di caduta durante il riposo grazie all'arresto a 27 cm
- mobilitazione più sicura ad altezza sedia grazie all'arresto a 41 cm
- posizione ottimale per l'accudimento del paziente grazie all'arresto a 80 cm

03

Superficie di degenza con telaio BiNetic

con doppia retrazione:

Reale prevenzione delle piaghe da decubito - molto più della semplice regolazione dell'inclinazione dello schienale consigliata dall'Associazione Tedesca degli Infermieri (DBfK)

- caratteristica principale: riduzione della compressione a carico del bacino, delle forze di attrito e di taglio grazie alla possibilità di retrarre il poggiatesta di 6 cm
- retrazione dello schienale di 11 cm come consigliato dall'Associazione Tedesca degli Infermieri (DBfK)

04

Telecomando di design

Più funzioni

- regolabile su 3 livelli di sicurezza: modalità accudimento, degente e sicurezza
- 2 posizioni regolabili automaticamente: seduta comfort e profilassi
- mobilitazione
- interruttore per la luce notturna
- regolazione separata del poggiatesta
- pulsante sicurezza bambini



NOVITÀ!

Ora disponibile anche con rivestimento antimicrobico.

05

Luce notturna

A scelta è possibile installare una luce notturna

- facilita l'orientamento nell'oscurità
- accresce la sicurezza per il degente
- si allaccia facilmente alla rete elettrica
- si accende/spegne con il telecomando

06

Trasportabilità di sentida 6 (fig.)

- a scelta ruote leggere Decora 100 mm, ruote leggere "Cover Design" 125/150 mm oppure ruote gemellate "LINEA" da 125 mm (v. fig.)
- si sposta con facilità anche fuori dalla stanza del paziente
- staffa del freno centrale (a livello della pediera) con bloccaggio direzionale integrato
- freno centralizzato su 4 ruote

Specifiche tecniche*

- regolazione dell'altezza: 27-80 cm
- carico di lavoro sicuro: 225 kg



La configurazione di hospital è compatibile anche con:



movita

movita casa

carisma


sentida 1, 3, 4

sentida 5

3 misure | 3 livelli di arresto

200 cm

Letto di lunghezza 200 cm:
Le protezioni laterali divise in sezioni proteggono senza vuoti intermedi > 318 mm* e senza imbottitura

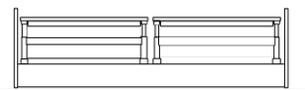

220 cm

Prolunga letto fino a 220 cm: nel letto sentida con protezioni laterali divise è regolabile provvisoriamente - la protezione totale è assicurata dall'imbottitura a livello della pediera (accessorio)



210 cm

Letto di lunghezza 210 cm:
Protezione con sponde laterali più lunghe dalla parte della pediera senza accessori e senza vuoti > 318 mm**



3 misure senza vuoto centrale > 318 mm e senza colonnina centrale

Tutti i letti di degenza wissner-bosserhoff sono dotati di prolunga letto integrata. La **prolunga automatica** (v. figura sotto/optional) consente di adattare il letto sentida con **protezioni laterali divise in sezioni** a lunghezze diverse senza dover ricorrere ad alcun ausilio. Ciascun modello è conforme ai requisiti della nuova norma IEC 60601-2-52.

Strategia basata su 3 livelli di arresto - per riposare, mobilizzare e accudire in sicurezza

sentida 6 si caratterizza non solo per la **possibilità di regolare l'altezza da 27 a 80 cm**, ma anche per un sensore di comando intelligente integrato che previene la collisione quando il letto è portato in posizione di seduta comfort. Ciò rappresenta un indiscutibile vantaggio soprattutto se abbinato alla prolunga letto fino a 220 cm

Sistema di verticalizzazione intelligente IVS

- pratico intervallo di regolazione dell'altezza 27-80 cm
- primo arresto intermedio per scendere dal letto ad altezza sedia a 41 cm
- prevenzione delle collisioni quando il letto è portato dalla posizione più bassa alla posizione di seduta comfort e quando si usa la prolunga

27 cm

Riduzione del rischio di caduta durante il riposo



41 cm

Mobilizzazione più sicura ad altezza sedia



80 cm

Posizione ottimale per l'accudimento del paziente



SafeFree®

Il principio esclusivo delle sponde laterali divise per una maggiore libertà e mobilitazione

4 protezioni laterali

1

Nella posizione rappresentata le protezioni laterali divise non solo danno la sensazione di confortevolezza, ma consentono anche libero accesso al paziente per le procedure quotidiane di accudimento, per cambiare le medicazioni o per rifare il letto. Non è necessario rimuovere né sistemare accessori ingombranti come colonne centrali o protezioni laterali fisse.

4 posizioni

Non è necessaria alcuna protezione



4 vantaggi

Senza barriere senza colonna centrale, senza imbottitura per i vuoti centrali



2

Per la sicurezza durante il riposo spesso è sufficiente portare il letto nella posizione di altezza minima e regolare al primo livello le protezioni all'altezza della testa. Questa protezione 'soft' evita l'applicazione di inutili barriere e riduce il rischio di caduta con le relative conseguenze. Le sponde laterali fungono da punto di riferimento senza limitare i movimenti del paziente.

Protezione "soft" senza l'uso di sistemi di ritenzione



Orientamento invece di sistemi di ritenzione




3

La protezione a ¾ prevede ai piedi del letto un vuoto appositamente studiato per ridurre l'uso di sistemi di ritenzione che possano limitare la libertà del paziente, garantendo al tempo stesso un elevato livello di sicurezza. La possibilità di regolare l'altezza del letto e delle sponde laterali fa sì che il letto sentida si adatti a tutti i pazienti indipendentemente dalla loro statura.

Protezione a ¾ senza l'uso di sistemi di ritenzione



Mobilizzazione con adattamento alla statura del paziente

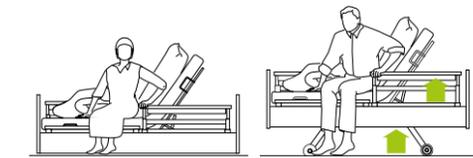


4

Il terzo livello di regolazione delle sponde assicura la protezione totale del paziente. Nella posizione più alta, i due elementi delle protezioni laterali sono talmente vicini tra loro da garantire la stessa sicurezza di una sponda continua. Non sono richiesti accessori per chiudere il vuoto centrale in caso di utilizzo di cinghie di ritenzione da applicare a livello addominale.

Protezione totale con materassi di 12-18 cm



Sicurezza oltre i limiti della nuova norma IEC 60601-2-52

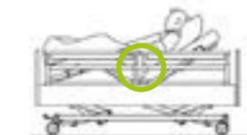

SafeSense*

Sicurezza + libertà giorno e notte grazie ai sensori intelligenti 'out of bed'

wissner-bosserhoff - il partner affidabile per evitare l'uso di sistemi di ritenzione: con SafeSense offriamo un dispositivo avanzato con sensori intelligenti che consentono di ridurre in maniera affidabile l'uso di sistemi di ritenzione sia di giorno che di notte. È dotato di luce notturna che si accende e si spegne automaticamente quando il paziente scende dal letto o vi si ridistende. SafeSense è compatibile con i campanelli disponibili in commercio ed è disponibile come optional o integrabile in un secondo tempo sui letti di degenza wissner-bosserhoff prodotti dopo il 2002.



↓
Maggiore sicurezza
meno sistemi di
ritenzione**

- Tempo di reazione più breve in caso di caduta
- Maggiore livello di sicurezza nei turni notturni e festivi
- Ideale in combinazione con i letti bassi sentida e con le sponde laterali SafeFree®

Accensione automatica della luce notturna

- La luce notturna si accende automaticamente quando il paziente scende dal letto
- La luce notturna si spegne automaticamente quando il paziente si ridistende a letto



Allarme individuale

- Campanello regolabile in maniera flessibile da 0 secondi a 30 minuti
- Adattabile alla mobilità del degente

Kit integrato o applicabile successivamente

- Accessorio opzionale per i letti di degenza WIBO di ultima generazione
- Kit applicabile in un secondo tempo per letti di degenza elettrici WIBO prodotti dopo il 2002
- Disponibile con collegamento via radio o via cavo



Funzioni supplementari del letto hospitel

Paragonato all'assortimento standard consentono l'uso nei pazienti in fase postacuta



Plug & Play

Grazie alla presenza di appositi supporti su entrambi i lati del letto, il telecomando può essere posizionato indifferentemente a destra o a sinistra oppure essere rimosso del tutto per evitare che il paziente si faccia male.



Alloggiamento per le cinghie di bloccaggio

Gli alloggiamenti per le cinghie di bloccaggio che si trovano sullo schienale, sull'alzagnocchia e sulla seduta offrono una soluzione stabile e facilmente accessibile per applicare le cinghie.



Tubo in PVC termoretraibile

Il cavo di alimentazione è rivestito in PVC termoretraibile per evitare che si attorcigli, aumentando in tal modo la sicurezza per il paziente, che non può strangolarsi con il cavo.



Distanziatori 3D

I distanziatori 3D assicurano una doppia protezione della parete, prevenendo il contatto sul piano orizzontale quando si manovra il letto e sul piano verticale quando si regola l'altezza.




CPR

La possibilità di sganciare lo schienale dalla testata in caso di emergenza consente di portare rapidamente in piano la superficie di degenza anche in caso di blackout elettrico o di emergenza.

Freni bloccabili (senza fig.)

I letti delle strutture residenziali psichiatriche spesso non devono essere spostati né dal personale né dal paziente. Ciò è assicurato dalla possibilità di bloccare i freni (disponibile per sentida 5/6 e carisma).

postacuta o nelle strutture psichiatriche.

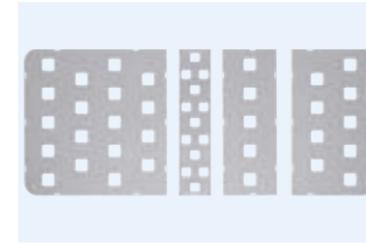

Superficie di degenza fissa

Se il paziente è particolarmente agitato, i componenti della superficie di degenza possono essere fissati anche al telaio per evitare che li sfilii.



Testata/pediera ribaltabili

La testata e la pediera ribaltabili agevolano il personale nello svolgimento delle procedure in caso di emergenza, consentendo una maggiore libertà di movimento. Inoltre, prevengono il rischio di 'infezioni crociate'.



Fascia antiurto

Le protezioni laterali con fascia antiurto proteggono il letto in caso di uso di dispositivi di sollevamento.



Prolunga letto automatica

Grazie alla prolunga automatica, i letti hospitel con protezioni laterali divise in sezioni sono adattabili, senza alcun ausilio, a diverse lunghezze (210 o 220 cm).



Imbottiture per le sponde laterali


Le sponde laterali imbottite proteggono sia il degente sia il letto. In questo modo si riduce considerevolmente il rischio che i pazienti agitati si facciano male con le sponde laterali troppo alte.

Accumulatore (senza fig.)

La presenza di un accumulatore consente di attivare le funzioni di regolazione anche in caso di blackout o durante il trasporto, assicurando in tal modo la massima autonomia e, di conseguenza, la massima sicurezza.

Il concetto di abitabilità di hospitel

La testata, la pediera e le sbarre delle sponde laterali hanno un profilo stondato per ridurre considerevolmente il rischio che pazienti agitati e molto agili si facciano male. La presenza di scanalature esterne le rende particolarmente stabili.

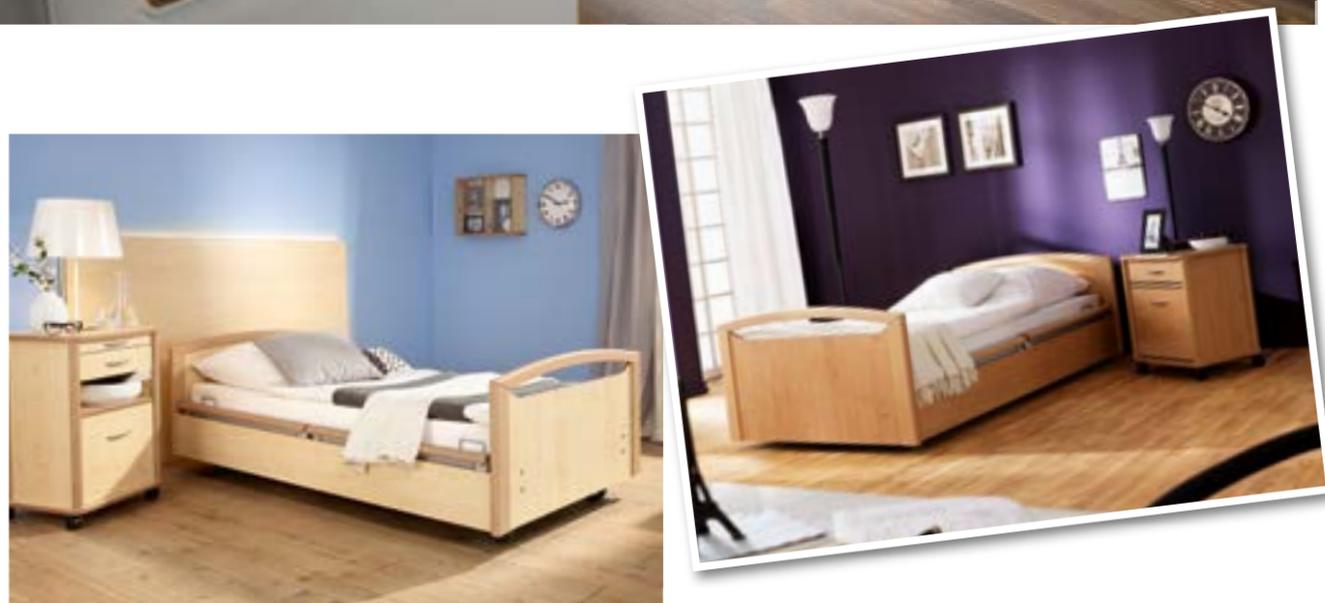

Modelli | Colori | Rivestimenti*



Per rendere i letti destinati ai reparti di lungodegenza e riabilitazione adattabili ai colori dell'arredo ospedaliero, è disponibile una gamma cromatica molto ampia con rivestimenti e corrimano "silverline".



* Alcuni rivestimenti sono disponibili dietro pagamento di un sovrapprezzo

Le nostre certificazioni – la vostra sicurezza


wissner-bosserhoff acconsente volontariamente a che le procedure operative e gestionali siano sottoposte a ispezione periodica da parte dell'ente certificatore TÜV. L'azienda è certificata DIN EN ISO 9001:2008 per i sistemi di gestione della qualità e DIN EN ISO 13485:2012+AC:2012 per la produzione di prodotti medicali.




Sigillo di qualità per la certificazione e la revisione del prodotto

Dotazioni e accessori

Misure

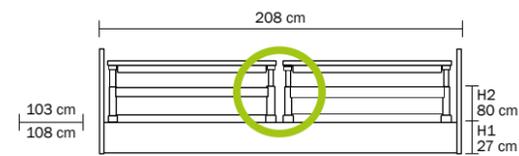


sentida 6 con protezioni laterali (10) divise in sezioni, senza vuoti
 Misure esterne: lungh. 208 cm, largh. 103 cm/108 cm
 Misure del materasso: lungh. = 200 cm, largh. = 87 cm
 alt. 1 25 cm (livello minimo), alt. 2 80 cm (livello massimo)

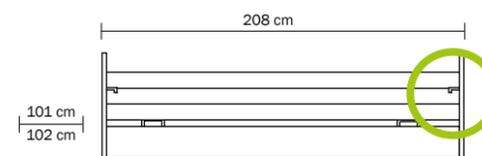


sentida con sponda laterale continua
 09 a due elementi con sgancio a pistola

Superfici di degenza

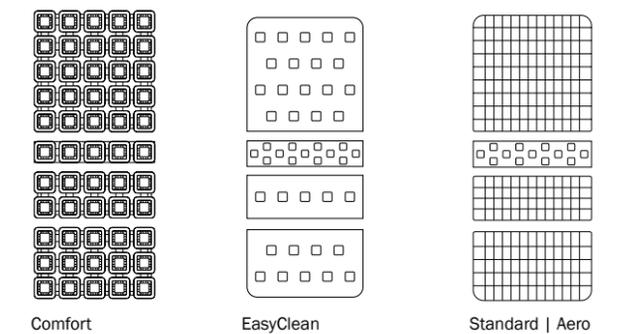


Dotazioni e accessori


Prolunghe letto

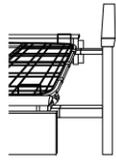


Prolunga temporanea per letto con protezioni laterali di tipo 10 (standard)

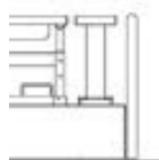


Prolunga permanente per letto con protezioni laterali di tipo 10 (opzione)

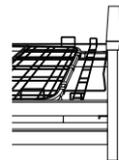

Prolunga permanente per letto con protezioni laterali di tipo 09 (opzione)

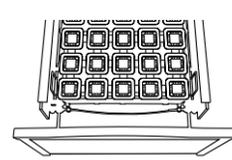

Prolunga letto automatica (opzione)

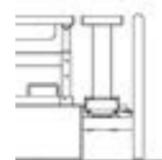

10-0570 / 10-0580
Elemento per prolunga letto di 20 cm (opzione)

Optional




Distanziatori verticali (diverse misure)



Distanziatori 3D ad azione orizzontale e verticale



Sgancio per CPR sullo schienale

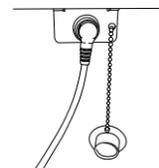

Plug & Play per utilizzare il telecomando da un solo lato o da ambedue i lati del letto




D-Box con attacco per lampada, per una migliore gestione dei cavi




Luce sotto il letto (attivabile)


Accessorio SafeSense

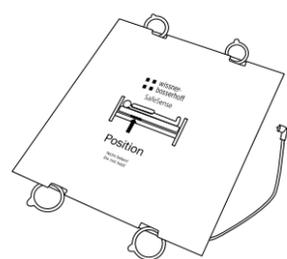


02-000712
Materasso con sensori 50 x 50 cm per schienale

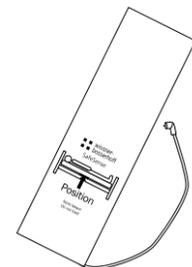


02-000713
Materasso con sensori 80 x 20 cm per seduta

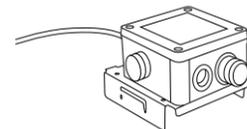

Allacciamento via cavo:
04-1544-001
Scatola 'Bed-Exit' per letto senza accumulatore
04-1544-004
Scatola 'Bed-Exit' per letto con accumulatore
Collegamento via radio:
04-1544-002
Scatola 'Bed-Exit' per letto senza accumulatore
04-1544-003
Scatola 'Bed-Exit' per letto con accumulatore

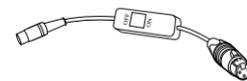


04-1508
Cavo adattatore con spina compatibile per il collegamento al campanello (personalizzabile)

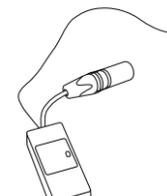


02-000726
Ricevitore radio (solo per il collegamento via radio)


Accessori

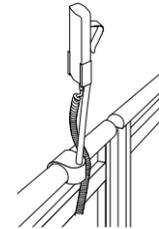


10-0419
Sostegno per telecomando per sponde laterali divise in sezioni
10-0421
Supporto per telecomando, corto

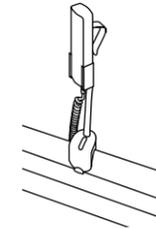


10-0422
Portaccessori e portatelecomando per sponde laterali continue
10-0421
Supporto per telecomando, corto

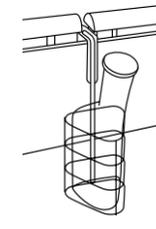

10-0424
Alloggiamento esterno per accessori e telecomando da applicare a lato del letto
50-0165 Supporto per contenitore urine
50-0164 Supporto per sacca delle urine (senza figura)

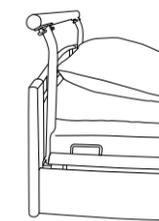

10-0534
Impugnatura per il trasporto EasyMove

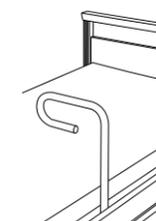


10-0715
Dispositivo di sollevamento per sponde laterali 09, 10 e ¾



50-0212 Elegante lampada alogena soluna con trasformatore da 12 V
50-0213 Elegante lampada alogena soluna senza trasformatore da 12 V
50-0237 Elegante lampada LED soluna con alimentatore
50-0550 Elegante lampada LED soluna senza alimentatore




50-0206
Tappetino largh. 90 x lungh. 200 cm, spessore circa 4,5 cm

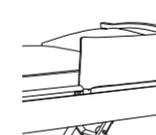

50-0174
Imbottitura per sponde laterali divise in sezioni 10




50-0338
Imbottitura per sponde laterali 09 a 2 elementi

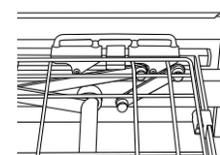


10-0563/10-0533/10-0521
Sistema di fissaggio Segufix
- per femorale
- per schienale
- per seduta



10-0719
Portacoperte, compatibile con tutti i letti

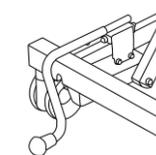

10-0707
Distanziatore dalla parte della testata corto (solo sentida 5 + 6)

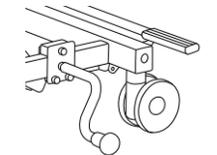

10-0708
Distanziatore laterale da parete corto (solo sentida 5 + 6)



Eleganza e funzionalità nell'assistenza

wissner-bosserhoff GmbH
Hauptstraße 4-6
D-58739 Wickede (Ruhr)
Tel.: +49(0)2377/784-0
Fax: +49(0)2377/784-163
E-mail: info@wi-bo.de

www.wi-bo.de