

■ ■ wissner-
■ ■ bossenhoff

Eleganza e funzionalità nell'assistenza

SafeSense®

Sistema di assistenza Bed-Exit



Sistema Assistente Bed-Exit

Cosa significa veramente?

SafeSense® segnala al personale di assistenza che il degente/paziente sta scendendo o è sceso dal letto. In questo modo è possibile riconoscere con anticipo le cadute e prevenirne le conseguenze. Sostanzialmente un sistema assistente Bed-Exit funziona come una lampada. Pertanto il suo funzionamento è chiaro e molto semplice da spiegare:



Timer non attivo



Timer attivo

→ Es. 15 minuti per uso notturno della toilette



Chiamata

→ Segnale al sistema di chiamata

SafeSense® = sicurezza + libertà

giorno e notte - grazie ai sensori intelligenti 'Bed-Exit'

Prevenzione delle cadute sostenibile per la massima sicurezza. Ecco ciò che offre il sistema assistente Bed-Exit SafeSense® di wissner-bosserhoff.

La percentuale di cadute a livello nazionale nelle case di cura e nelle cliniche si attesta a 1,5 cadute per letto all'anno*. Le lesioni derivanti dalle cadute, in particolare negli anziani, spesso sono gravi e nel peggiore dei casi irreversibili.

Con SafeSense® è possibile migliorare il livello di sicurezza, in particolare nei turni di notte e nei fine settimana quando è presente meno personale. Durante il riposo notturno, il sistema assistente Bed-Exit può contribuire a ridurre l'uso delle sponde laterali, mantenendo così la libertà del degente/paziente. Una luce notturna automatica guida in sicurezza il degente/paziente verso il bagno. Si attiva automaticamente quando il degente/paziente scende dal letto e si spegne quando ci ritorna. È anche possibile regolare l'intervallo di tempo continuo dei singoli livelli di mobilità del degente/paziente mediante un sistema di chiamata temporizzato.

5

milioni di cadute di persone anziane all'anno.

Quasi un terzo delle persone dai 65 anni in su e la metà degli ultraottantenni cade almeno una volta all'anno. Solo in Germania si registrano circa 5 milioni di cadute di persone anziane all'anno.

(Fonte: Gesundheit und Krankheit im Alter. Ed.: Karin Böhm, Statistisches Bundesamt/ Clemens Tesch-Römer, Deutsches Zentrum für Altersfragen/ Thomas Ziese, Robert Koch-Institut, Berlino 2009)



Prevenzione con i letti bassi per lungodegenti sentida



Prevenzione con image 3 per letti ospedalieri universali con posizione abbassata



Prevenzione delle cadute nelle case di cura e nelle cliniche



Più sicurezza – meno cadute/FEM*

- Tempo di reazione più breve in caso di caduta
- Maggiore livello di sicurezza nei turni notturni e festivi
- Ideale in combinazione con i letti bassi sentida e image 3 e con SafeFree®-sponde laterali
- Soluzione migliore e complementare ai sistemi di contenzione**



Maggiore mobilità

- Grazie ai letti bassi sentida/image 3
- Tramite una strategia basata su 3 livelli di arresto WIBO
- Grazie alle sponde laterali WIBO Safe-Free®



Protezione individuale

- Percorso notturno verso il bagno sicuro grazie alla luce notturna attivabile mediante sensori
- Sistema di chiamata infermiera con timer flessibile (0 - 30 min.) si adatta alla mobilità del degente/paziente



I vantaggi per le strutture

- Sicurezza dell'investimento
- Sicurezza per il paziente/degente in tutte le posizioni di lavoro
- Certezza del diritto per gli operatori senza dover adempiere a requisiti accessori
- Procedure di accudimento efficaci ed efficienti
- Senza costi aggiuntivi per gli accessori di sicurezza
- Giusta efficienza con cinghie di bloccaggio

Ordinare SafeSense®

Per i letti di degenza WIBO



- Integrato come opzione
- Come kit da applicare successivamente per tutti i letti di degenza di wissner-bosserhoff (dal 2002)
- Disponibile con collegamento via cavo o a radiofrequenza


Per il letto ospedaliero image 3



- Ordinabile come opzione
- Disponibile o consigliato con collegamento via cavo o a radiofrequenza

Componenti di SafeSense®


Tappetino a sensori 2

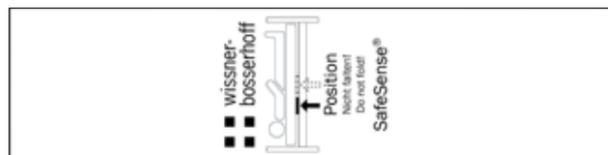

80 x 20 cm
Articolo 02|-000781

Kit di collegamento


Cavo adattatore con o senza interruttore di accensione/spengimento e spina per il collegamento al terminale di chiamata (personalizzato) per collegamenti via cavo e via radio

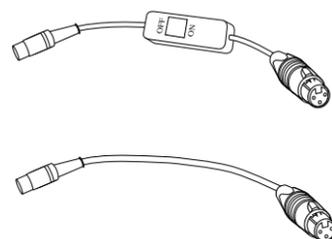

Bed-Exit-Box 2



con supporto per fissaggio universale
Articolo 04-1851
disponibile con collegamento via cavo o a radiofrequenza

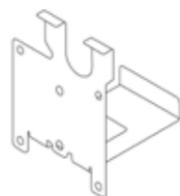

Supporto di lamiera per motore DU09
Articolo 01|-011193



Supporto di lamiera per motore Q7
Articolo 01|-011194

Ricevitore radio

Disponibile solo per letti di degenza!

 <p>Ricevitore di chiamate per sistema di chiamata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tramite la spina dell'adattatore WIBO accoppiabile a tutti i sistemi di chiamata in commercio • Microricevitore radio • Possibilità di associare 32 trasmettitori → dotazione individuale della camera secondo i desideri/le esigenze del degente • Con funzione assistenza. L'allarme viene bloccato per 15 min. 	 <p>Presca per cercapersone</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segnalazione acustica e visiva del sistema di chiamata • Facile conferma direttamente sul cercapersone • Eccellente per l'uso in piccole case di riposo e cura senza il sistema di chiamata • Efficienza energetica! In standby consuma solo 0,3 W 	 <p>Presca per ricevitore</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accende la luce di orientamento o a pavimento della camera • Possibilità di associare 32 trasmettitori • Segnale radio attivato tramite sensori inviato automaticamente quando il degente/paziente scende dal letto • Efficienza energetica! In standby consuma solo 0,2 W 	 <p>Telefono a impulsi con bracciale trasmettitore</p> <ul style="list-style-type: none"> • Centrale di chiamata di emergenza e comodo telefono in un'unica soluzione • La chiamata ricevuta viene inoltrata a tre numeri preimpostati • Il dispositivo vivavoce integrato permette di parlare con il degente per 3 minuti • Display illuminato
--	--	--	--

Funzionamento



Raccomandazioni per l'uso

	CR*/CC* con sistema di chiamata	CR*/CC* e piccole case famiglia senza sistema di chiamata	Assistenza domiciliare
Bed-Exit-Box 2	Cavo ✓	Radiofrequenza ✓	Radiofrequenza ✓
Ricevitore di chiamate	✓		
Presca per cercapersone		✓	✓
Presca per ricevitore	✓	✓	✓
Telefono a impulsi con bracciale trasmettitore		✓	✓

Members of LINET Group

Linet Italia srl unipersonale

Via Galileo Galilei 48 | 25020 Poncarale BS | Italia
tel.: +39 030 3229519 | fax: +39 030 2540116
e-mail: info@linetitalia.com | www.linetitalia.com



Brevetti UE n.:
EP000001623654
EP000002052707

