

Solido 3

Tavolo servitore universale



Paziente

- Funzione di inclinazione per la lettura
- Una permanenza a letto più piacevole



Staff

- Facile da movimentare
- Movimenti ergonomici



Management

- Design moderno con opzioni di colore
- Altamente funzionale a un prezzo conveniente



Solido 3

Il tavolo servitore Solido 3 è un accessorio pratico che renderà più piacevole la permanenza a letto del paziente. Vanta diverse caratteristiche ergonomiche che rendono la gestione molto facile e intuitiva sia per il paziente sia per il personale infermieristico.

Controllo semplice

Il tavolo servitore Solido 3 può essere dotato di una molla per il controllo della direzione verso l'alto senza l'uso della manopola di comando.

Inclinazione pratica

La possibilità di inclinare il vassoio sarà utile ai pazienti durante la lettura o l'utilizzo di un tablet.

Controllo ergonomico

Grazie alle caratteristiche ergonomiche e alla particolare struttura della colonna, la movimentazione del tavolo servitore è molto semplice.

- 1 Impugnatura per una facile movimentazione.
- 2 Grazie al maggiore spazio, il paziente può avvicinare ancora di più il tavolo al corpo, riuscendo a mangiare più comodamente.
- 3 Regolazione in altezza estremamente facile mediante l'uso di una leva.
- 4 Il fermo integrato protegge i libri e gli altri oggetti dalla caduta, anche quando il tavolo è inclinato.
- 5 Le protezioni di metallo fungono da pratico fermo per gli oggetti posizionati sul tavolo.






HandyClip

La forma unica della colonna consente di fissare una clip che può essere spostata verticalmente. Alla clip possono essere attaccati vari accessori: un portabottiglie, un gancio per sacche urina, un piccolo ripiano per telefono, ecc. Il paziente ha sempre tutto a portata di mano.



Design: funzionalità ed estetica

Il tavolo ha linee lisce per essere pulito facilmente e viene prodotto in diverse combinazioni di colori. Il colore del tavolo può quindi essere abbinato a quello del letto e degli altri accessori della camera.

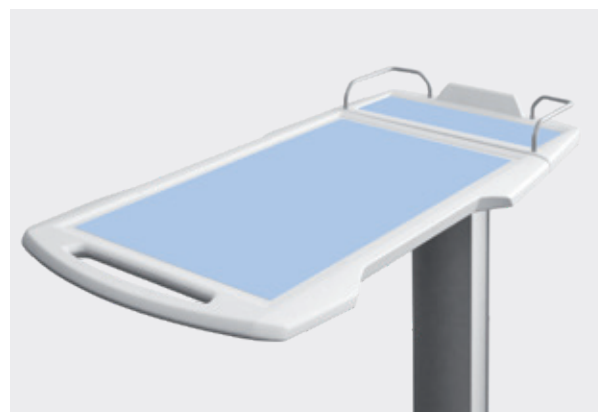

Dettagli utili

- La sua forma a T, la colonna liscia, la tecnologia uniforme e il pratico design strutturale, ne semplificano la pulizia.
- Il carrello a forma di T può facilmente essere riposto sotto il letto anche in presenza di una quinta ruota.
- È possibile scegliere tra:
 - Due carrelli a ingombro ridotto con due piccole ruote integrate.
 - Carrello a forma di C con due ruote più grandi da 50 o 75 mm per spostare il tavolo più facilmente e facilitarne la manutenzione.
- Capacità di carico del tavolo 30 kg.



Parametri tecnici

Dimensioni interne del vassoio	Parte fissa	11×35 cm
	Parte più grande	64×35 cm
Dimensioni esterne del vassoio		94,5×45 cm
Regolazione altezza (dipende da ruote e carrello)	Carrello a C e ruote da 50 mm	103×71 cm
	Carrello a C e ruote da 75 mm	104,5×72,5 cm
	Carrello a T	102×70 cm
Capacità di carico	Al centro del vassoio	30 kg
Dimensioni del carrello	Carrello a C e ruote da 50 mm	80,5×44 cm
	T	79,5×43,5 cm
Altezza del carrello	Carrello a C e ruote da 50 mm	11,3 cm
	T	3,4 cm
Angolo di inclinazione		0° – 8° – 21° – 31° – 40° – 48°



Members of LINET Group

LINET Italia srl unipersonale

Via Galileo Galilei 48 | 25020 Poncarale BS | Italia

tel.: +39 030 3229519 | fax: +39 030 2540116 | e-mail: info@linetitalia.com | www.linet-italia.it

