

Eleganza 4

LETTO PER AREA CRITICA



Soluzione personalizzata per l'area critica

Eleganza 4: Soluzione personalizzata



100%

accesso libero al paziente

per l'area critica



360°

semplificazione
pensato per il paziente
orientato sulle necessità
sostenibilità

Soluzione personalizzata

Eleganza 4 è un letto elettrico ospedaliero progettato appositamente sui bisogni dei reparti di area critica. Grazie all'architettura aperta del suo sistema, il letto offre soluzioni flessibili e personalizzate in modo da rispondere a tutte le attività ed esigenze terapeutiche specifiche dei reparti di area critica. È possibile scegliere il letto adatto a tutte le applicazioni terapeutiche, alle differenti necessità dei pazienti e per tutti i budget a disposizione.



UN SOLO LETTO

=

Molteplici applicazioni



Stroke
Unit



Reparto di
pneumologia



Terapia
intermedia



Terapia
post-operatoria



terapia
intensiva



In ogni punto di cura

La maggior parte dei trattamenti e delle problematiche relative alla terapia intensiva sono concentrate nell'area della testa e del tronco del paziente. Eleganza 4 consente di accedere con la massima facilità alla parte superiore del corpo del paziente. Le sponde laterali esclusive supportano il personale nelle attività infermieristiche quotidiane oltre che nelle situazioni critiche: sicure, comode ed ergonomiche in ogni momento.



Basta un tasto

Il pannello di controllo è facile da raggiungere e semplicissimo da usare. La maggior parte delle funzioni di posizionamento e di emergenza sono attivabili con la pressione di un tasto. Un solo infermiere è in grado di gestire tutte le situazioni con rapidità, facilità e sicurezza.



Concentrato sulla parte superiore corporea

Grazie ai comandi di controllo integrati in entrambe le sponde laterali superiori, l'operatore ha la possibilità di accedere direttamente a tutte le funzioni del letto. Progettato utilizzando la tecnologia SoftDrop che consente di avvicinarsi al paziente senza alcun impedimento. Questa possibilità ottimizza il lavoro rendendolo più ergonomico e consente di evitare sforzi fisici e di risparmiare tempo.



Strategia a mani libere

La regolazione dell'altezza del letto e la posizione visita sono attivabili con i comandi a pedale. Le mani dell'infermiere restano così libere per effettuare le terapie o per aiutare la mobilizzazione del paziente.

- Semplice da raggiungere
- Semplice da usare



Maggiore sicurezza del paziente

La sicurezza del paziente ha la massima priorità. Il letto ospedaliero Eleganza 4 è dotato di funzioni sofisticate che proteggono il paziente nelle situazioni più diverse.



i-Brake

Il freno automatico impedisce le cadute provocate dall'instabilità del letto, soprattutto durante le fasi di mobilizzazione.



Allarme uscita dal letto

Il sistema monitora i movimenti del paziente a letto e la sua eventuale uscita. Può essere impostato in due modalità a seconda delle esigenze e della mobilità del paziente.



il **50%–70%**
delle cadute in ambito
ospedaliero sono associabili al
letto. LINET è la risposta per
evitare questo rischio.*



Le sponde laterali

Le sponde laterali e la loro altezza ottimizzano le specifiche esigenze dei pazienti:

- Prevenzione del rischio di intrappolamento
- Uso di diversi sistemi antidecubito (passivi e attivi)
- Prevenzione delle cadute

Luce notturna

La funzione luce notturna consente al paziente di orientarsi durante le ore notturne e conferisce un senso di sicurezza.

Arresto a 30° e 45°

Lo schienale si arresta automaticamente a un'inclinazione di 30 e di 45 gradi. Inoltre, il sistema Ergoframe offre una posizione comoda e sicura per la prevenzione delle piaghe da decubito e per consentire una ventilazione corretta dei polmoni.

Safestop

Il letto si ferma automaticamente quando viene portato all'altezza minima.

EMR ready

Il letto Eleganza 4 è dotato di una tecnologia che può inviare i dati al sistema informatico dell'ospedale. Sono disponibili una serie di informazioni sullo stato del letto e del paziente che possono essere visualizzate sul pannello di controllo e tramite SafetyMonitor.



Maggiore comfort per il paziente

Eleganza 4 consente di migliorare le attività terapeutiche e di ottimizzarne gli esiti clinici. L'intera gamma di funzioni specifiche permette al paziente di diventare più autonomo oltre a offrire un maggiore comfort.



Sedia cardiologica

Questa posizione aiuta i pazienti che soffrono di disturbi dell'apparato respiratorio e agevola le funzioni del sistema cardiovascolare. Inoltre, aumenta il comfort dei pazienti durante la lettura e i pasti.

Per una maggiore indipendenza

Il paziente ha potenzialmente accesso immediato alle funzioni base del letto tramite due diversi comandi. Si tratta di comandi integrati nelle sponde laterali e del comando palmare che può essere alloggiato sulle sponde laterali.



Per ottimizzare il flusso di lavoro

Bilancia integrata

La bilancia integrata consente di prendere decisioni in tutta rapidità e con la massima sicurezza direttamente al punto di cura. La misurazione del peso attuale del paziente può essere eseguita con comodità e senza stress sia per il paziente che per il personale infermieristico e senza i rischi derivanti dalla movimentazione del degente.

Esami radiologici

Grazie al piano rete radiotrasparente e alla struttura a colonne del letto, è possibile eseguire le radiografie polmonari senza dover movimentare il paziente.



Sistema di spinta motorizzato i-Drive

La quinta ruota integrata e motorizzata è un pratico sistema di trasporto del paziente che richiede il minimo sforzo da parte degli infermieri nel movimentare il letto, riducendo così gli infortuni lombari e altri disturbi muscoloscheletrici che possono colpire il personale. I rischi inerenti al trasporto del paziente allettato sono ridotti garantendo il massimo della sicurezza e del comfort.



Migliore gestione delle lesioni da pressione

L'ampia gamma di materassi LINET, passivi, ibridi e attivi, risponde alle disparate esigenze dei singoli pazienti prevenendo le piaghe da decubito e facilitando la loro cura. Una serie di tecnologie innovative migliorano gli esiti clinici impiegando le raccomandazioni basate sulle evidenze cliniche.



Il 90%

delle piaghe da decubito può essere evitato*



360° pensato per il paziente



Eleganza 4 + Virtuoso



Eleganza 4 + Clinicare 100HF




Eleganza 4 + Clinicare 30




Eleganza 4 + Clinicare 20





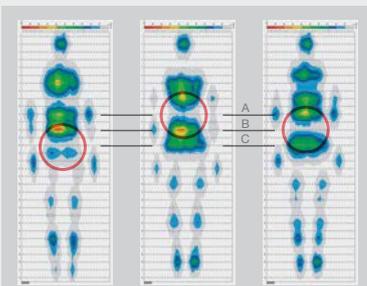

Ciclo a 3 celle (A, B, C) a pressione zero

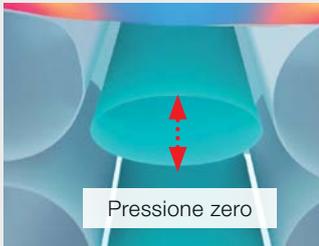

Pressione zero

Funzione Ergoframe

Questa funzione migliora il comfort del paziente e l'ergonomia quando è disteso sul letto, riducendo al minimo l'area di compressione su polmoni e addome.

Tecnologia moderna

I materassi LINET utilizzano tecnologie sviluppate sulla base di risultati clinici.

** Effetto pressione zero dei materassi Virtuoso*

Pressione zero

Il materasso Virtuoso con tecnologia a 3 celle offre i vantaggi della terapia a pressione alternata e della pressione zero al fine di ottimizzare la terapia.

La mobilitazione attiva passo

Grazie alle sue funzioni speciali, il letto Eleganza 4 consente di risolvere la questione della mobilitazione, una delle problematiche cruciali nelle aree critiche. Una mobilitazione rapida e soprattutto sicura, con la partecipazione attiva del paziente, aumenta l'indipendenza e favorisce il miglioramento delle condizioni cliniche del degente.



dopo passo

360° orientato sulle
necessità

Passo 1: il paziente si mette a sedere sul letto utilizzando le sponde laterali ergonomiche e il Mobi-Lift®.



Passo 2: il paziente è seduto con i piedi appoggiati per terra. Il profilo ergonomico delle sponde laterali e il Mobi-Lift® garantiscono stabilità e sicurezza per il paziente.



Passo 3: grazie al tasto presente sul Mobi-Lift®, il paziente può impostare l'altezza del letto in modo indipendente ed è così in grado di alzarsi lentamente in base alla sua autonomia. L'infermiere può offrire sostegno con meno sforzo.



Mobi-Lift®

Mobi-Lift® è una caratteristica esclusiva dei letti LINET. Offre un supporto ergonomico alla mobilizzazione del paziente durante le fasi di entrata/uscita dal letto. Il paziente può impostare il letto per un'uscita autonoma e facile utilizzando i tasti alto e basso.



CLINICAL

In media, nei primi 10 giorni si verifica una perdita giornaliera della massa muscolare pari al 2-3%*. È opportuno dare ai pazienti un supporto adeguato in modo da accelerare la mobilizzazione.

Posizionamento



Posizione Trendelenburg



Anti-Trendelenburg



Posizione vascolare



Ergoframe con schienale alzato di 30°



Altezza minima



Posizione visita



Posizione cardiaca



Arresto automatico schienale a 30°

* Davis, K. G., & Kotowski, S. E. (2015). Prevalence of Musculoskeletal Disorders for Nurses in Hospitals, Long-Term Care Facilities, and Home Health Care: A Comprehensive Review. *Human Factors*, 57(5), 754–792. <https://doi.org/10.1177/0018720815581933>

Soluzioni che crescono con le

Un piano rete. Molteplici soluzioni.

In ospedale ogni investimento deve avere un ritorno ma non strettamente economico. Sono infatti fondamentali anche il miglioramento degli esiti clinici e delle terapie erogabili, l'ottimizzazione delle attività infermieristiche nonché l'abbattimento dei costi per il sistema sanitario nazionale.

La completezza e variabilità delle funzioni disponibili con Eleganza 4 permettono di personalizzare il letto in modo da disporre del modello più adatto alle esigenze specifiche di ciascun reparto. Le caratteristiche dell'architettura aperta di Eleganza 4 possono soddisfare l'ambiente clinico più esigente e la necessità di controllare i costi.



Terapia post-operatoria



Terapia intermedia



Stroke Unit



Reparto di pneumologia

Eleganza 4 – Letto da area critica per diverse richieste

Eleganza 4 Care BASIC



La tua scelta:

- Più pannelli di controllo disponibili
- Portabiancheria integrato
- Mobi-Lift®

Eleganza 4 Care SAFETY



La scelta incentrata sulla sicurezza:

- Luce notturna
- Allarme i-Brake
- Allarme uscita dal letto

Eleganza 4 Care MOBILITY



La scelta incentrata sulla mobilità:

- i-Brake
- Comandi a pedale
- Quinta ruota direzionale
- EMR-ready

Eleganza 4 Care PROFESSIONAL



La scelta di un letto per area critica dotato di attrezzature professionali:

- Quinta ruota con sistema di spinta motorizzato i-Drive
- Basamento con carter continuo
- Radiotrasparente
- EMR-ready e SafetyMonitor

Scegliete le soluzioni più adatte per le esigenze specifiche dei vostri pazienti!

vostre esigenze



Assistenza tecnica

La modularità del letto comporta una serie di vantaggi economici.

La medesima struttura letto permette di avere le medesime parti di ricambio e garantisce un'assistenza tecnica efficace ed economicamente più conveniente.

- Stessi pezzi di ricambio per tutti i modelli
- Risposta rapida di in caso di guasto
- Assistenza in tutto il mondo



Contratti di assistenza

LINET offre un regolare servizio di manutenzione e di qualità nell'ambito delle varie tipologie di contratto.

Il contratto di assistenza garantisce un letto e un materasso con prestazioni al 100% nel tempo.



Formazione clinica

- La formazione del personale effettuata da personale specializzato garantisce un corretto uso del letto nel tempo
- Workshop e corsi di formazioni professionali
- I tecnici autorizzati seguono corsi di aggiornamento periodici
- Possibilità di formazione direttamente in ospedale



Semplicità di pulizia e igiene

La struttura a colonna, le superfici piatte e senza giunzioni oltre ai pezzi in plastica rimovibili semplificano la pulizia e la disinfezione di tutto il letto.



Flessibilità

Pannelli di controllo disponibili



Basamenti disponibili





Certificati

LINET è una società certificata secondo gli standard e i sistemi di qualità europei: EN ISO 9001, EN ISO 13485.

I prodotti sono realizzati in conformità agli standard europei per la tecnologia medica e letti ospedalieri: EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-6, EN 60601-2-52, EN ISO 14971, EN 45501, 93/42/EEC, 2014/31/EU, 2011/65/EU.

Parametri elettrici

Alimentazione	230V CA, 50/60 Hz
Tensione massima di ingresso	370 VA
Protezione da acqua e polvere	IP X4
Tipo di protezione per rischi elettrici	Classe I
Livello di protezione per rischi elettrici	Parti applicate tipo B
Modalità operativa del motore elettrico (fattore di carico)	max. 2 min acceso/18 min spento

Parametri tecnici

Dimensioni esterne	217,5 × 100 cm
Allunghetto	0–22 cm
Dimensioni del materasso	208 × 90 cm
Altezza delle sponde laterali dal piano rete	45 cm
Regolazione dell'altezza	41–79 cm
Inclinazione TR/ATR	14°/14°
Inclinazione dello schienale	65°
Inclinazione sezione gambe	25°
Carico di lavoro in sicurezza	250 kg
Peso massimo del paziente	185 kg

Eleganza 4

Paziente

- Miglioramento di terapia, sicurezza e comfort del paziente
- Concentrato sulla terapia e sulla mobilizzazione attiva
- Prevenzione delle lesioni da pressione



- Supporta gli esiti clinici del paziente
- Semplifica le attività infermieristiche quotidiane
- Semplifica la manipolazione grazie ai comandi integrati nelle sponde laterali superiori



Personale

Gestione

- Soluzione personalizzata per l'area critica
- Soluzione sostenibile che cresce con le esigenze
- L'offerta LINET comprende assistenza e corsi di formazione avanzati



Members of LINET Group

LINET Italia srl unipersonale

Via Galileo Galilei 48 | 25020 Poncarale BS | Italia
tel.: +39 030 3229519 | fax: +39 030 2540116 | e-mail: info@linetitalia.com | www.linet-italia.it

