

Letto da parto AVE 2



Benvenuto al mondo, bambino!

L'inizio del viaggio

Il letto da parto AVE 2 è adatto a tutte le fasi del parto: prodromica, dilatante, espulsiva, secondamento ed post-partum. Utilizzando un letto AVE 2, una donna può partorire sostenuta dai suoi famigliari, in un ambiente molto confortevole e premuroso, come se fosse nella sua propria stanza da letto.



Design attrattivo e funzionale



Facile sanificazione

Il posizionamento ad un'altezza minima di 600 mm è idoneo per un accesso sicuro al letto e per vari esercizi che agevolano il travaglio.



Durante il travaglio, la partoriente potrà cambiare facilmente la sua posizione.



Il massimo sollevamento, fino a 1050 mm, permette una posizione perfetta per il trattamento perineale.



Un sonno rilassante è importante durante la fase di recupero. Ave 2 possiede tutte le caratteristiche per assecondare la partoriente anche nella fase post-partum.



I punti di forza di AVE 2



	— La libertà di cambiare la posizione durante il parto — Incoraggia ed agevola il parto naturale — Massima sicurezza per il bambino e la madre durante il travaglio 	Paziente
	— Funzioni intuitive e facili da adoperare — Massima sanificazione — Carico di lavoro ridotto al minimo 	Personale
	— Design eccezionale — Alto livello di erogazione delle cure — Da sale distinte per parto e travaglio a centro nascita 	Gestione

Dove inizia il miracolo

SPAZIO ADESSO

Un semplice meccanismo a perno fa slittare la sezione dei piedi, preparando la postazione per la fase di espulsione. La sezione piedi rimane inclusa nel letto, al riparo di qualsiasi rischio di ulteriore contaminazione o di carico di lavoro supplementare per lo staff.



della vita

La pediera è la parte del letto dove, grazie alle soluzioni tecniche innovative, si ha il massimo dell'ergonomia e la possibilità di eseguire l'intera procedura del parto.



Facendola scorrere verso il basso, da sostegno ai piedi.



Facendola scorrere verso l'alto, è possibile ottenere rapidamente un letto in posizione orizzontale. La pediera ha la stessa capacità di carico del letto intero e permette l'utilizzo dell'area come confortevole culla provvisoria per il bambino.

Sistemazione facile

La progettazione del supporto delle gambe consente al team di cura di rispondere molto rapidamente ed efficace a diverse situazioni che possono verificarsi durante il parto.



Aggiustamento rapido del supporto gambe nella posizione desiderata.



Regolazione dell'altezza dei reggi gambe in funzione della statura paziente

La sezione gambe permette l'apertura orizzontale per agevolare il facile accesso alla futura mamma

FORMA AD U

La particolare forma ovale del sedile crea lo spazio necessario all'accesso nella zona perineale e si adatta molto bene alla vasca da bagno minimizzando i spazi vuoti.



L'inclinazione pelvica motorizzata indipendente offre una migliore elevazione del coccige.

MANIGLIE

Aumentano il comfort di una donna nella seconda fase del parto.

4LIFT

La soluzione telescopica innovativa permette una bassa altezza ideale per accedere al letto in modo sicuro ed un'altezza supplementare per il trattamento.



Sponde

Le sponde laterali, con pannello di controllo integrato sono facilmente reclinabili, in modo silenzioso. Si possono posizionare sotto il letto durante i trasferimenti da un letto all'altro e servono anche ad agevolare l'accesso al letto.



CONTROLLO SEMPLICE

Pannello di controllo integrato, con simboli facili da intuire sia per la partoriente sia per il personale infermieristico.

Dotato di opzione blocco da parte dello staff.

Controlli abilitati:

1. Regolazione dell'altezza e dell'inclinazione
2. Posizione Trendelenburg
3. Controllo del blocco
4. Luce sotto il letto (facoltativo)
5. Chiamata infermiera (opzionale)



IGIENE E SICUREZZA

L'elevato standard dell' incontaminazione, la costruzione compatta delle varie sezioni così come la copertura in plastica della base riducono il tempo necessario per la pulizia del letto.

1. Pelle batteriostatica
2. Rivestimento senza cuciture
3. Spazio compatto e separabile
4. Verniciatura elettrostatica con rivestimento in polvere epossidica contro la corrosione

La struttura solida del letto la parto AVE 2 non contiene punti aguzzi o bordi taglienti, assicurando la massima sicurezza di tutti quelli che si trovano nella prossimità del letto.



Sicurezza





Trendelenburg



CPR

1. Trendelenburg e CPR
2. Batteria di backup
3. ABS facilmente disinfettabile
4. Controllo del blocco
5. Sistema di sollevamento a colonna
6. Facile accesso al freno centrale
7. Spostamento facile con la rotella direzionale e le maniglie di spinta
8. Testiera rimovibile per anestesisti (opzionale)
9. Chiamata infermiera (opzionale)
10. Supporti ribaltabili

La libertà di cambiare



Litotomica



Sul fianco



Semi sdraiata con piedi appoggiati sul supporto gambe



Posizione verticale



Semi sdraiata appoggiata sul supporto piedi



Appoggiata sul trapezio

la posizione



Posizione All fours



Semi seduta utilizzando le reggi gambe



Semi seduta sulla sezione piedi



Posizione epidurale



Trattamento perineale



Semi seduta assistita

Sì al parto naturale

La nascita naturale è indicata se la partoriente desidera mantenere il controllo del suo corpo, partecipando attivamente durante tutto il travaglio, con minimi interventi medici. Con una buona preparazione e un adeguato sostegno, le donne spesso si sentono fortificate e profondamente soddisfatte dal parto naturale. AVE 2 è stato costruito per assecondare in tutto questa decisione.



LA SCELTA DEI COLORI

La gamma dei colori disponibile soddisfa tutti i stili di arredamento di una sala da parto.



Accessori



Testiera rimovibile



Secchio in acciaio inox con ruote



Asta porta flebo telescopica



Telecomando



Luce sotto il letto



Bacinella 4,5l in acciaio inox scorrevole




Materasso aggiuntivo



Supporto anteriore



Chiamata infermiera

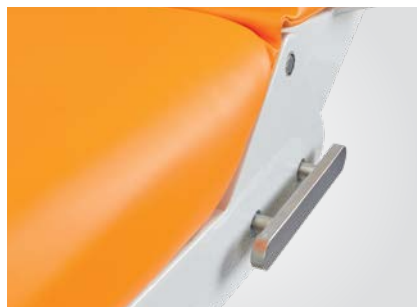

Barra porta drenaggi



Barra di appoggio



Cucino

Parametri



PARAMETRI TECNICI

Lunghezza totale della parte letto	2122 mm
Lunghezza minima nell'impostazione predefinita	1570 mm
Larghezza totale	980 mm
Dimensione rotelle	150 mm
Altezza minima	600 mm
Altezza massima	1050 mm
Inclinazione Sezione schienale	-10°/+70°
Inclinazione Sezione sedile	0°/+18,5°
Trendelenburg	0°/-10°
Poggia gambe verticale	0°/+135°
Poggia gambe orizzontalmente	0°/+60°
Angolo di regolazione della poggia piedi	0°/-22°
Massimo carico paziente	240 kg
Peso totale del prodotto	245 kg

PARAMETRI ELETTRICI

Batteria backup	24V/1.2 Ah
Tensione di alimentazione	230 V
Tensione	24 V
Copertura del letto di parto	IPX4
Apparecchio di classe	class I.
Classifica di componenti d'attacco B	

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Poggia gambe standard con cinghie (coppia)
- Batteria backup
- Sezione piedi scorrevole imbottita
- Rivestimento materasso senza cuciture in pelle batteriostatica
- Trendelenburg elettrico e CPR manuale
- Supporto per asta da flebo su entrambi i lati del letto
- Sponde con pannello controllo integrato
- Pannello fisso con comandi
- Maniglie (coppia)
- Ruote 150 mm, 1x direzionale
- Freno centrale
- Accoppiamento equipotenziale
- Cavo di rete a scelta
- Varie opzioni di colore
- Imballaggio

AVE 2

Paziente

- La libertà di cambiare la posizione durante il parto
- Incoraggia ed agevola il parto naturale
- Massima sicurezza per il bambino e la madre durante il travaglio



- Funzioni intuitive e facili da adoperare
- Massima sanificazione
- Carico di lavoro ridotto al minimo



Personale

Gestione

- Design eccezionale
- Alto livello di erogazione delle cure
- Da sale diverse per parto e travaglio a centro nascita



 **wissner-**
bosserhoff

 **LINET®**

Members of LINET Group

Linet Italia. s r.l. unipersonale

via G.Galilei n°48 | 25020 Poncarale (BS)

tel.: +39 030 3229519 | fax: +39 0302540116 | e.mail: marketing@linetitalia.com | www.linet-italia.com

